


■各種連結部品


品 名	品 番	材 質	備 考
十字型ジョイント	JT4-MM	SUS316	四方オネジ
	JT4-S1	SUS316	三方オネジ一方袋ナット
	JT4-S2A	SUS316	二方袋ナット
	JT4-S2B	SUS316	〃
	JT4-S4	SUS316	四方袋ナット
十字型分岐ジョイント	JT4B-R	SUS316	ラブチャー用
T字型ジョイント	JT3-MM	SUS316	三方オネジ
	JT3-S1A	SUS316	二方オネジ一方袋ナット
	JT3-S1B	SUS316	〃
	JT3-S2	SUS316	二方袋ナット
	JT3-S3	SUS316	三方袋ナット
T字型分岐ジョイント	JT3B-R	SUS316	ラブチャー用
L字型ジョイント	JTL-MM	SUS316	二方オネジ
ユニオン型ジョイント	JTU-WM	SUS316	両端オネジ
	JTU-M	SUS316	一方オネジ
	JTU-WF	SUS316	両端メネジ
袋ナットスリーブジョイント	JTS-W35	SUS316	溶接用
	JTS-W46	SUS316	〃
	JTS-W68	SUS316	〃
	JTS-G	SUS316	ゴム管用
グラウンドナットスリーブジョイント	JTG-W35	SUS316	溶接用
	JTG-W46	SUS316	〃
	JTG-W68	SUS316	〃
オネジスリーブジョイント	JTM-W35	SUS316	溶接用
	JTM-W46	SUS316	〃
	JTM-W68	SUS316	〃
	JTM-G	SUS316	ゴム管用
メネジ閉止ジョイント	JTP-S	SUS316	W18山24用
	JTP-S58	SUS316	PF5/8用
オネジ閉止ジョイント	JTC-S	SUS316	W18山24用
	JTF-C	SUS316	フランジジョイント用

十字型ジョイント

例1：四方オネジ

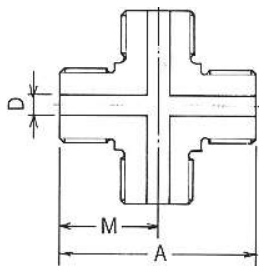

例2：二方オネジ二方袋ナット

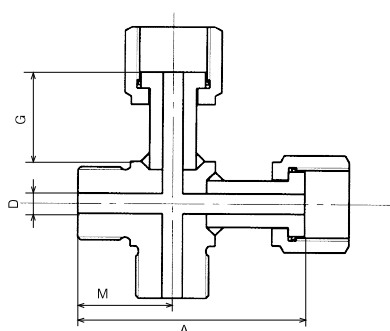


接続部	略記号	ネジの呼び	A mm	φD mm	G mm	M mm
四方オネジ		W18山24	52	5		26
四方袋ナット		W18山24	63	5	21	
三方オネジ 一方袋ナット		W18山24	52	5	21	26
二方オネジ 二方袋ナット		W18山24	61	5	21	26
二方オネジ 二方袋ナット		W18山24	63	5	21	23.5
二方オネジ 二方袋ナット ラプチャー用		W18山24 M16×P1.5	61	5	21	26


※A寸法は略記号の位置に置いたときの水平長さになります。

T字型ジョイント

例1：三方オネジ

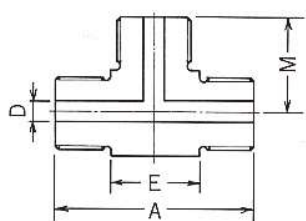


例1：一方オネジ二方袋ナット

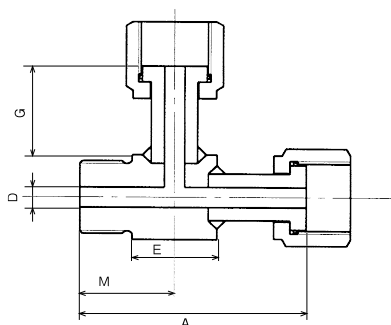

接続部	略記号	ネジの呼び	A mm	φD mm	E mm	G mm	M mm
三方オネジ		W18山24	52	5			26
三方袋ナット		W18山24	63	5	21	21	
二方オネジ 一方袋ナット		W18山24	61	5		21	26
二方オネジ 一方袋ナット		W18山24	47	5	21	21	23.5
一方オネジ 二方袋ナット		W18山24	55	5	21	21	23.5
二方オネジ 一方袋ナット ラプチャー用		W18山24 M16×P1.5	52	5		21	26


※A寸法は略記号の位置に置いたときの水平長さになります。

L型ジョイント（二方オネジ）

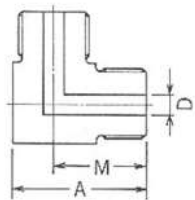


接続部	略記号	ネジの呼び	Amm	φ Dmm	Mmm
一方オネジ		W18山24	40	5	23.5

ユニオン型ジョイント 二方オネジ

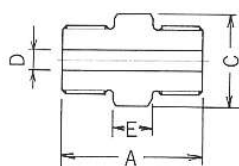


接続部	略記号	ネジの呼び	Amm	Cmm	φ Dmm	Emm
オネジ-オネジ		W18山24	36	24×21 六角	5	10

ユニオン型ジョイント 一方オネジ

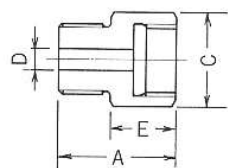

接続部	略記号	ネジの呼び	Amm	Cmm	φ Dmm	Emm
オネジ-メネジ		W18山24	30	24×21 六角	5	17


ユニオン型ジョイント 二方メネジ

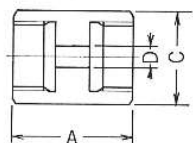

接続部	略記号	ネジの呼び	Amm	Cmm	Dmm
メネジ-メネジ		W18山24	30	24×21 六角	5


袋ナットスリーブジョイント 溶接用

※溶接する配管のサイズにより3種類あります。

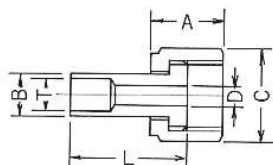

接続部	略記号	ネジの呼び	Amm	Bmm	Cmm	ϕ Dmm	Lmm	ϕ Tmm
メネジ	— Σ	W18山24	19	11.5	24×21 六角	$\frac{3}{4}$ 6	35	$\frac{5}{6}$ 8


袋ナットスリーブジョイント ゴム管用

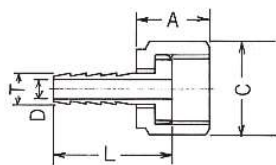

接続部	略記号	ネジの呼び	Amm	Cmm	ϕ Dmm	Lmm	ϕ Tmm
メネジ	$\wedge\wedge\wedge\Sigma$	W18山24	19	24×21 六角	5	30	8

グラウンドナットスリーブジョイント 溶接用


※溶接する配管のサイズにより3種類あります。

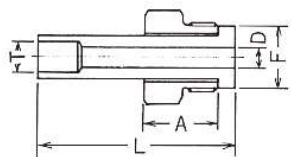

接続部	略記号	ネジの呼び	Amm	ϕ Dmm	ϕ Fmm	Lmm	ϕ Tmm
オネジ	— $\perp$ →	W18山24	19	$\frac{3}{4}$ 6	16	35	$\frac{5}{6}$ 8


オネジスリーブジョイント 溶接用

※溶接する配管のサイズにより3種類あります。

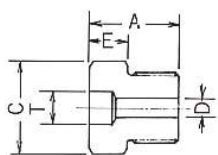


接続部	略記号	ネジの呼び	Amm	Cmm	φ Dmm	Emm	φ Tmm
オネジ		W18山24	23	24×21 六角	$\begin{matrix} 3 \\ 4 \\ 6 \end{matrix}$	10	$\begin{matrix} 5 \\ 6 \\ 8 \end{matrix}$

オネジスリーブジョイント ゴム管用

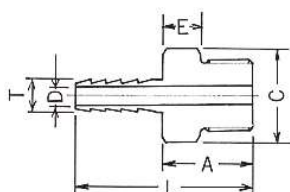


接続部	略記号	ネジの呼び	Amm	Cmm	φ Dmm	Emm	Lmm	φ Tmm
オネジ		W18山24	23	24×21 六角	5	10	45	8

メネジ閉止ジョイント W18山24用

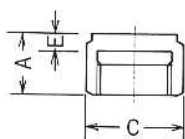

接続部	略記号	ネジの呼び	Amm	Cmm	Emm
メネジ		W18山24	15	24×21 六角	4

オネジ閉止ジョイント W18山24用

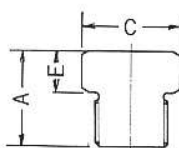

接続部	略記号	ネジの呼び	Amm	Cmm	Emm
オネジ		W18山24	23	24×21 六角	10


■各種接続用部品

品 名	品 番	材 質	備 考
攪拌機用アダプタジョイント	JTF-SA26	SUS316	W26山24×W20山24
	JTF-SA15	SUS316	W26山24×W15山24
	JTF-SAM20	SUS316	M24×P1.5×W20山24
	JTF-SAM15	SUS316	M24×P1.5×W15山24
攪拌機用オネジ閉止ジョイント	JTF-SAC	SUS316	W26山24
	JTF-SAMC	SUS316	M24×P1.5
フランジ用ジョイント	JTF-N	SUS316	φ10.5
	JTF-SP	SUS316	サンプリング管用
温度計保護管用袋ナット	JTF-TWS	SUS316	ステンレス製用
ユニオン型ジョイント	JTU-S	SUS316	両端袋ナット
攪拌機用分岐ジョイント	JTSB-3F	SUS316	三方袋ナット
	JTSB-3P	SUS316	三方パイプ
	JTSB-3P1F	SUS316	三方パイプ一方袋ナット
JIS配管ネジ用ジョイント	JTJ-T18MM	SUS316	PT1/8- W18山24 オネジ-オネジ
	JTJ-T18MF	SUS316	オネジ-メネジ
	JTJ-T18FF	SUS316	メネジ-メネジ
	JTJ-T18FM	SUS316	メネジ-オネジ
	JTJ-T14MM	SUS316	PT1/4- W18山24 オネジ-オネジ
	JTJ-T14MF	SUS316	オネジ-メネジ
	JTJ-T14FF	SUS316	メネジ-メネジ
	JTJ-T14FM	SUS316	メネジ-オネジ
	JTJ-T38MM	SUS316	PT3/8- W18山24 オネジ-オネジ
	JTJ-T38MF	SUS316	オネジ-メネジ
	JTJ-T38FF	SUS316	メネジ-メネジ
	JTJ-T38FM	SUS316	メネジ-オネジ
	JTJ-T12MM	SUS316	PT1/2- W18山24 オネジ-オネジ
	JTJ-T12MF	SUS316	オネジ-メネジ
	JTJ-T12FF	SUS316	メネジ-メネジ
	JTJ-T12FM	SUS316	メネジ-オネジ
圧力計用ジョイント	JTJ-F38FM	SUS316	PF3/8- W18山24 メネジ-オネジ
	JTJ-F38FF	SUS316	メネジ-メネジ
	JTJ-F12FM	SUS316	PF1/2- W18山24 メネジ-オネジ
	JTJ-F12FF	SUS316	メネジ-メネジ

■ フタフランジ用ステンレス製部品

攪拌機用アダプタジョイント


※接続ネジサイズにより4種類あります。

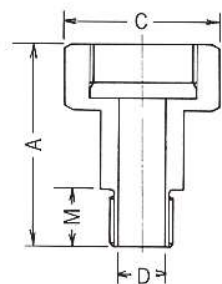

接続部	略記号	ネジの呼び	Amm	Cmm	φ Dmm	Mmm
メネジ-オネジ		a W20山24 b W15山24 c W26山24 c M24P1.5	49	37×32 六角	15 10	14


攪拌機用オネジ閉止ジョイント

※接続ネジサイズにより2種類あります。

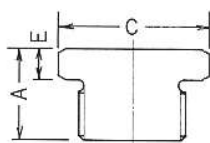

接続部	略記号	ネジの呼び	Amm	Cmm	Emm
オネジ		W26山24	40	37×32 六角	8
		M24P1.5	37		


フランジ用ジョイント

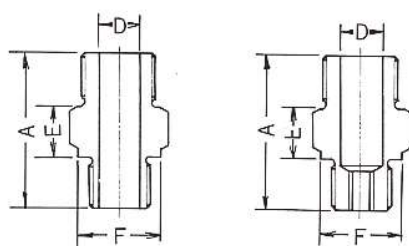

スタンダードタイプ サンプル管用

接続部	略記号	ネジの呼び	Amm	φ Dmm	Emm	φ Fmm
オネジ-オネジ		W18山24 b W15山24	40	10.5	10	20


温度計保護管用袋ナットジョイント

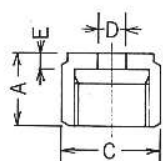

ステンレス用

接続部	略記号	ネジの呼び	Amm	C	φ D	Emm
メネジ		W18山24	18	24×21 六角	7	4


ユニオン型ジョイント (両端メネジ)

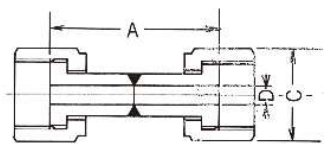

接続部	略記号	ネジの呼び	Amm	Cmm	φ Dmm
メネジ-メネジ		W18山24	30	24×21 六角	3

■攪拌機用分岐ジョイント (TVS-1型)


三方袋ナット

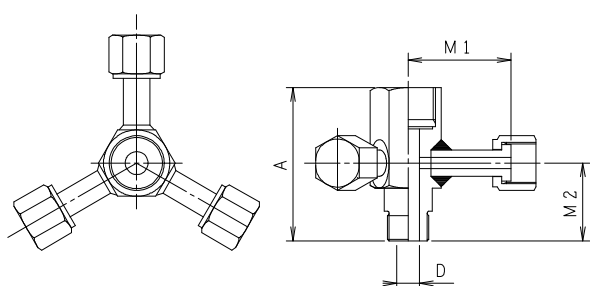

接続部	略記号	ネジの呼び	Amm	φ Dmm	M1mm	M2mm
四方メネジ 一方オネジ		d M24P1.5 e W18山24	67	10	45	34


■攪拌機用分岐ジョイント (TVS-N2型)

三方パイプ

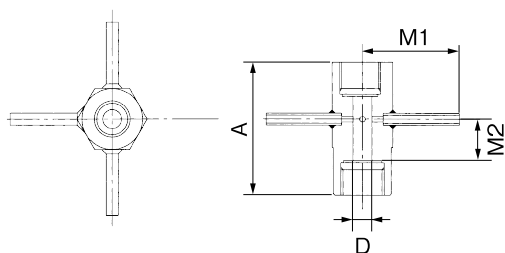


接続部	略記号	ネジの呼び	Amm	φ Dmm	M1mm	M2mm
二方メネジ 三方パイプ		d M24P1.5 f PF5/8 1/4"	70	10	50	23

三方パイプ-方袋ナット

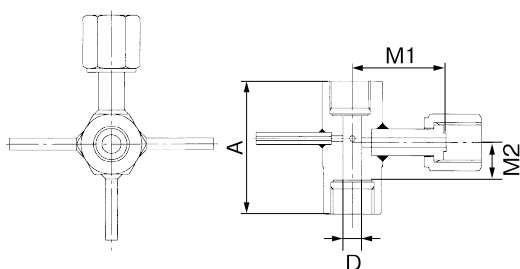

接続部	略記号	ネジの呼び	A	φ Dmm	M1mm	M2mm
三方メネジ 三方パイプ		d M24P1.5 f PF5/8 1/4" PF1/2	70	10	50	21

■JIS配管ネジ（PTネジ）用切替ジョイント

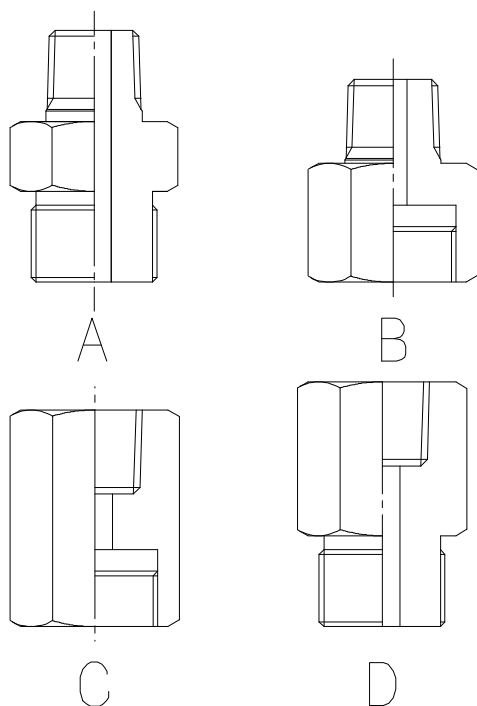


タイプ	※PTネジ	W18山24
A	オス	オス
B	オス	メス
C	メス	メス
D	メス	オス

※PTネジ	タイプ	品 番
1/8	A	JTJ-T-18MM
	B	JTJ-T-18MF
	C	JTJ-T-18FF
	D	JTJ-T-18FM
1/4	A	JTJ-T-14MM
	B	JTJ-T-14MF
	C	JTJ-T-14FF
	D	JTJ-T-14FM
3/8	A	JTJ-T-38MM
	B	JTJ-T-38MF
	C	JTJ-T-38FF
	D	JTJ-T-38FM
1/2	A	JTJ-T-12MM
	B	JTJ-T-12MF
	C	JTJ-T-12FF
	D	JTJ-T-12FM

※PTオスネジ=Rネジ、PTメスネジ=Rcネジ

■圧力計用切替ジョイント

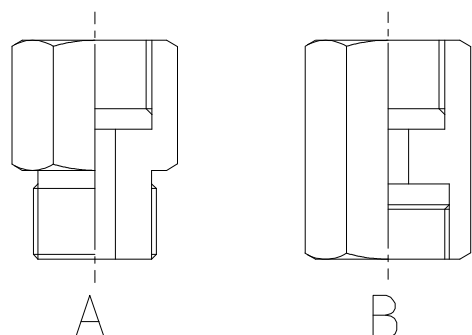

タイプ	※PFネジ	W18山24
A	メス	オス
B	メス	メス

※PFネジ	タイプ	品 番
3/8	A	JTJ-F38FM
	B	JTJ-F38FF
1/2	A	JTJ-F12FM
	B	JTJ-F12FF


※PFネジ=Gネジ

以下は特殊接続用部品と、主にTAS型で使用する規格部品です。TAS型容器本体に関しましてはP63（金属製反応装置）をご参照ください。


品 名	品 番	材 質	備 考
ボンベ2次用ジョイント	JTB-2NM	SUS316、真鍮	N2低压用 M16×P1.5-W18山24オネジ
	JTB-2NMH	SUS316、真鍮	N2高压用 W12.5山20-W18山24オネジ
	JTB-2HM	SUS316、真鍮	H2低压用 M16×P1.5逆ねじ-W18山24オネジ
	JTB-2HMH	SUS316、真鍮	H2高压用 W12.5山20逆ねじ-W18山24オネジ
ボンベ1次用ジョイント	JTB-1NM	SUS316、真鍮	N2用 W22山14-W18山24オネジ
	JTB-1HM	SUS316、真鍮	H2用 W22山14-W18山24オネジ
	JTB-1PM	SUS316、真鍮	プロパン用 W22山14-W18山24オネジ
1/16" パイプ×100L - W18山24	JTP-16M	SUS316	オネジ
	JTP-16F	SUS316	メネジ
1/8" パイプ×100L - W18山24	JTP-18M	SUS316	オネジ
	JTP-18F	SUS316	メネジ
1/4" パイプ×100L - W18山24	JTP-14M	SUS316	オネジ
	JTP-14F	SUS316	メネジ
3/8" パイプ×100L - W18山24	JTP-38M	SUS316	オネジ
	JTP-38F	SUS316	メネジ
φ8 パイプ×100L - W18山24	JTP-08M	SUS316	オネジ
	JTP-08F	SUS316	メネジ
φ6 パイプ×100L - W18山24	JTP-06M	SUS316	オネジ
	JTP-06F	SUS316	メネジ
1/4" パイプ×50L - PF5/8メネジ	JTP-14PF	SUS316	TVS-N2-120, 200, 300, 500用
攪拌機用アダプター	ASJ-SA	SUS316	M20×P1.5-M24×P1.5(R付)
バルブ用ジョイント	ASJ-BJ	SUS316	1/4" ×30L-M16×P1.5
M16袋ナット	ASJ-PN	SUS316	M16×P1.5
フランジ用ジョイント	ASJ-N	SUS316	M16×P1.5-M16×P1.5(R付)
オネジ閉止ジョイント	ASJ-C24	SUS316	M24×P1.5
オネジ閉止ジョイント	ASJ-C16	SUS316	M16×P1.5
メネジ閉止ジョイント	ASJ-P	SUS316	M16×P1.5
圧力計・安全弁ブロック	ASJ-WB	SUS316	M16×P1.5-M14×P1.5-M14×P1.5
安全弁用ノズル1/2	ASJ-12SN	SUS316	M14×P1.5-PF1/2（袋ナット）
圧力計用ノズル	ASJ-PG	SUS316	M14×P1.5-PF1/2（袋ナット）

■ボンベ用ジョイント

2次用ジョイント

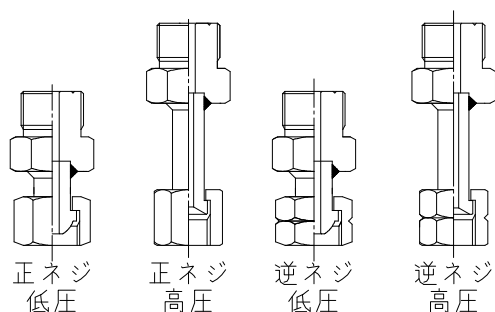

1次用ジョイント

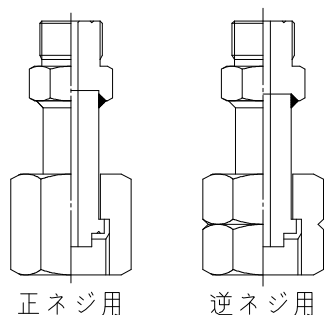


	タイプ		品 番	ネジ径
2次用	正	低圧	JTB-2NM	M16×P1.5
		高圧	JTB-2NMH	W12.5山20
	逆	低圧	JTB-2HM	M16×P1.5
		高圧	JTB-2HMH	W12.5山20
1次用	正		JTB-1NM	W22山14
	逆		JTB-1HM	W22山14


※一般的な可燃性ガスのボンベ用ジョイントは逆ネジとなります。

特殊なガスボンベではネジ形状が異なる場合がありますのでご注意ください。

■連結アダプタージョイント

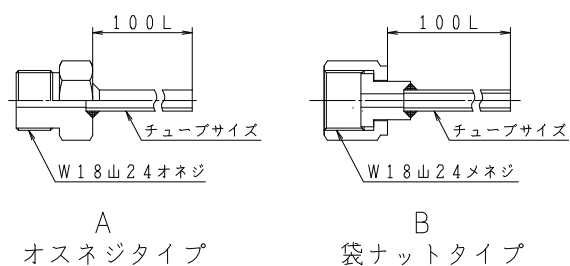

変換例) 弊社規格バルブ接続ネジから1/4"チューブに変換する場合

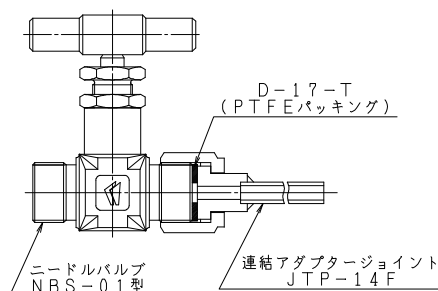

チューブ サイズ	タイプ	品 番
1/16 "	A	JTP-16M
	B	JTP-16F
1/8 "	A	JTP-18M
	B	JTP-18F
1/4 "	A	JTP-14M
	B	JTP-14F
3/8 "	A	JTP-38M
	B	JTP-38F
φ8	A	JTP-08M
	B	JTP-08F
φ6	A	JTP-06M
	B	JTP-06F

以下の部品は弊社規格製品に使用する架台等の専用部品です。装置に標準で付属しているものもありますのでご注文の際は確かめください。

品 名	品 番	備 考
簡易架台	TB-V13	V100～300金属容器用 四脚型
	TB-V5	V500金属容器用 四脚型
	TB-V10	V1000金属容器用 四脚型
	TB-D13	D100～300金属容器用 四脚型
	TB-D510	D500、1000金属容器用 四脚型
	TB-D15	D1500金属容器用 四脚型
	PB-PR-1-1	台形型 TVS-1-200まで
	PB-PR-1-1A	四脚型 TVS-1-300、500用
	PB-PR-1-N2	TVS-N2-120、200、300、500用
TVS-N2用固定具	SD-VSO-10	O型 TVS-N2-100用
	SD-VSO-12	O型 TVS-N2-120、200用
	SD-VSO-30	O型 TVS-N2-300用
	SD-VSO-50	O型 TVS-N2-500用
	SD-VSU-10	U型 TVS-N2-100用
	SD-VSU-12	U型 TVS-N2-120、200用
	SD-VSU-30	U型 TVS-N2-300用
	SD-VSU-50	U型 TVS-N2-500用
安全防護架台	SB-V1	V丸形架台
	SB-V10	U1000N用 架台本体、パネル、配管込
作業架台	WT-V-10	U1000N用
上フタ受け具	SD-U10	TEM-U1000N用
	SD-V1	TEM-V100～V500型用
保護面	GM-1	
密閉式モーター	MS-60	60W コントローラー付
工具一式	TK	
六角棒レンチ	TK-NL-10	TVS-N2-120、200用
	TK-NL-12	TVS-N2-300用
	TK-NL-14	TVS-N2-500用
トルクレンチ	TK-NT-10	TVS-N2-120、200用
	TK-NT-12	TVS-N2-300用
	TK-NT-14	TVS-N2-500用
Y型工具	TK-NY	TVS-N2用
締め付け用ポール	TK-NP	


弊社規格品に使用するパッキングの一覧表です。予備パッキングセットは、規格品に使用しているパッキング全てを使用頻度に応じて、適当な枚数ずつ組み合わせています。どうぞご利用下さい。またこれらパッキング類は、使用期間や条件によって劣化の度合いが異なります。消耗品として早めにお取り替えいただけますようお願いいたします。

販売は単品でもいたしますが、品物によっては最少販売枚数を設定させていただいております。詳細はお問い合わせください。

品 名	品 番	材 質	備 考
予備パッキングセット	TEM-VPS1		TEM-V100、V200用
	TEM-VPS3		TEM-V300、V500用
	TEM-UPS10N		TEM-U1000N用
	TEM-VPS10N		旧TEM-V1000N用
予備パッキングセット	TEM-DPS1G		TEM-D100（ガラス容器）用
	TEM-DPS2G		TEM-D200（ガラス容器）用
	TEM-DPS3G		TEM-D300（ガラス容器）用
予備パッキングセット	TEM-DPS1M		TEM-D100、D200（金属容器）用
	TEM-DPS3M		TEM-D300（金属容器）用
	TEM-DPS5M		TEM-D500、D1000（金属容器）用
	TEM-DPS15M		TEM-D1500（金属容器）用
内部パッキングセット	D-NBS	PTFE	NBS型バルブ用グラウンド（上・中・下）

品 名	品 番	材 質	備 考
MV型軸受セット	MV1-PST	PTFE	M-1、MV-1、MV-1N共通3個セット
	MV1-PSR	ベアリー	
	MV1-HG-PST	PTFE	MV-1HG、MV-1NHG共通3個セット
	MV1-HG-PSR	ベアリー	
MV型用Oリング	MV1-POS	バイトン®	シール部共通
	MV1-POC	バイトン®	冷却ジャケット部共通
M-2型軸受セット	M2-PST8	PTFE	φ8用 5個セット
	M2-PSR8	ベアリー	
	M2-PST10	PTFE	φ10用 5個セット
	M2-PSR10	ベアリー	
	M2-HG-PST8	PTFE	M-2HG φ8用 5個セット
	M2-HG-PSR8	ベアリー	
	M2-HG-PST10	PTFE	M-2HG φ10用 5個セット
	M2-HG-PSR10	ベアリー	
M-3型軸受セット	M3-PST8	PTFE	φ8用5個セット
	M3-PSR8	ベアリー	
	M3-PST10	PTFE	φ10用5個セット
	M3-PSR10	ベアリー	
	M3-HG-PST8	PTFE	M-3HG φ8用 5個セット
	M3-HG-PSR8	ベアリー	
	M3-HG-PST10	PTFE	M-3HG φ10用 5個セット
	M3-HG-PSR10	ベアリー	
M-4型軸受セット	M4-PST8	PTFE	φ8用5個セット
	M4-PSR8	ベアリー	
	M4-PST10	PTFE	φ10用5個セット
	M4-PSR10	ベアリー	
	M4-HG-PST8	PTFE	M-4HG φ8用 5個セット
	M4-HG-PSR8	ベアリー	
	M4-HG-PST10	PTFE	M-4HG φ10用 5個セット
	M4-HG-PSR10	ベアリー	
M型用Oリング	M-POS	バイトン®	M-2、M-3、M-4シール部共通
	M-POC	バイトン®	M-2、M-3、M-4冷却部共通
VP型軸受セット	VP-PS8	カーボン入PTFE	軸受セットφ8用 3個セット
	VP-PS10	カーボン入PTFE	軸受セットφ10用 3個セット
VP型用Oリング	VP-POS	バイトン®	Oリング シール部
	VP-POC	バイトン®	Oリング 冷却ジャケット部

■ 攪拌機軸受け参考図

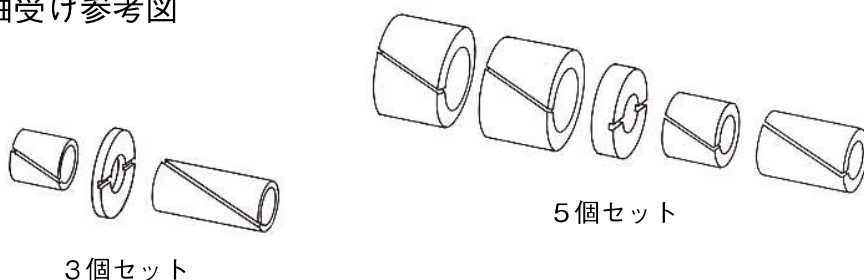

部品・消耗品

パッキング

品 名	品 番	材 質	備 考
TEM-D型用上部パッキング	D-56U-N	ネオブレン®	100・200mL
	D-56U-S	シリコン	100・200mL
	D-56U-T	PTFE	100・200mL
	D-56U-TW	PTFE巻	100・200mL
	D-56U-V	バイトン®	100・200mL
	D-86U-N	ネオブレン®	300mL
	D-86U-S	シリコン	300mL
	D-86U-T	PTFE	300mL
	D-86U-TW	PTFE巻	300mL
	D-86U-V	バイトン®	300mL
	D-126U-N	ネオブレン®	500・1000mL
	D-126U-S	シリコン	500・1000mL
	D-126U-T	PTFE	500・1000mL
	D-126U-TW	PTFE巻	500・1000mL
	D-126U-V	バイトン®	500・1000mL
	D-159U-N	ネオブレン®	1500mL
	D-159U-S	シリコン	1500mL
	D-159U-T	PTFE	1500mL
	D-159U-TW	PTFE巻	1500mL
	D-159U-V	バイトン®	1500mL
TEM-D型用下部パッキング	D-56D	PTFE	100・200mL
	D-86D	PTFE	300mL
TEM-V型用上下部パッキング	P-45-N	ネオブレン®	V100・200型上フタ用
	P-45-S	シリコン	
	P-45-VTC	バイトン®	PFAコーティング
	P-45-V	バイトン®	
	P-45-TW	FEP巻	
	S-46	カーボン入PTFE	V100・200型下フランジ用
	SP-1200	ガラス入PTFE	V100・200型スペーサー
TEM-V型用上下部パッキング	P-62-N	ネオブレン®	V300・500型上フタ用
	P-62-S	シリコン	
	P-62-VTC	バイトン®	PFAコーティング
	P-62-V	バイトン®	
	P-62-TW	FEP巻	
	S-67	カーボン入PTFE	V300・500型下フランジ用
	SP-3500	ガラス入PTFE	V300・500型スペーサー
TEM-U型用上下部パッキング	P-95-V	バイトン®	U1000型上フタ用
	P-95-K	カルレッツ®	U1000型上フタ用
	P-102	カーボン入PTFE	U1000型下フランジ用
	G-130	バイトン®	下フランジバックアップシール
	SP-1000	ガラス入PTFE	スペーサー
	G-240	シリコン	セフティボックス用

品 名	品 番	材 質	備 考
TVS-1型用パッキング	D-15S	PTFE	5mL
	D-18S	PTFE	10mL TVS-N2型共用
	D-23S	PTFE	20mL
	D-25S	PTFE	30mL TVS-N2型共用
	D-29S	PTFE	50mL
	D-36S	PTFE	100mL
	D-41S	PTFE	150mL
	D-46S	PTFE	200mL
	D-52S	PTFE	300mL
	D-57S	PTFE	500mL
TVS-N2型用パッキング	D-28S	PTFE	50mL
	D-48S	PTFE	120mL・200mL
	D-48M	SUS316	120mL・200mL
	D-53S	PTFE	300mL
	D-53M	SUS316	
	D-65S	PTFE	500mL
	D-65M	SUS316	
TAF-SR型用パッキング	P-40	バイトン®	Oリング 50mL用
	P-50	バイトン®	Oリング 100mL用
	P-60	バイトン®	Oリング 300mL用
安全弁用パッキング	SVP-V	バイトン®	φ8
	SVP-K	カルレッツ®	φ8


■代表的パッキング形状



平型パッキング



スペーサー

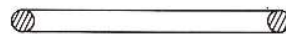

O-リング

部品・消耗品

パッキング

品 名	品番	材 質	備 考
TAS型用接続部パッキング	T-11	SUS316	$\phi 11 \times \phi 5 \times 0.3$ t (M14用)
	T-13	SUS316	$\phi 13 \times \phi 6 \times 0.3$ t (M16用)
	T-17	SUS316	$\phi 17 \times \phi 10 \times 0.3$ t (M20用)
	T-18	SUS316	$\phi 18 \times \phi 6 \times 0.3$ t (PF1/2用)
	T-20	SUS316	$\phi 20 \times \phi 10 \times 0.3$ t (PF5/8用)
	T-21	SUS316	$\phi 21 \times \phi 12 \times 0.3$ t (M24用)
	T-23	SUS316	$\phi 23 \times \phi 14 \times 0.3$ t (M26用)
接続部パッキング	D-11	PTFE	$\phi 11 \times \phi 5 \times 1.5$ t 内部式温度計保護管用、圧力計用 (PF1/4)
	D-15	PTFE	$\phi 15 \times \phi 5 \times 1.5$ t 圧力計用 (PF3/8)
	D-16A	PTFE	$\phi 16 \times \phi 10 \times 1.5$ t 外部式温度計保護管用
	D-17-N	ネオプレン®	$\phi 17 \times \phi 6 \times 1.5$ t ネジ接続部
	D-17-S	シリコン	$\phi 17 \times \phi 6 \times 1.5$ t ネジ接続部
	D-17-T	PTFE	$\phi 17 \times \phi 6 \times 1.5$ t ネジ接続部
	D-17-V	バイトン®	$\phi 17 \times \phi 6 \times 1.5$ t ネジ接続部
	D-17-M	PTFE	$\phi 17 \times 1.5$ t 穴無し
	D-18	PTFE	$\phi 18 \times \phi 6 \times 1.5$ t 圧力計用 (PF1/2)
	D-20.5	PTFE	$\phi 20.5 \times \phi 16 \times 1.5$ t フランジ用ジョイント部
	D-25	PTFE	$\phi 25 \times \phi 15 \times 1.5$ t 攪拌機
	D-26	PTFE	$\phi 26 \times \phi 20 \times 1.5$ t 攪拌機アダプター

■カタログ製品ネジ規格について

弊社製品に用いる継手には並目ネジ（一般的なネジ）ではなく、細目ネジ（ネジピッチが細かいネジ）を採用しております。

●細目ネジの特徴

- ・破断に対して強い。
- ・緩みにくい。
- ・わずかな締め加減での微調整が可能。

●弊社の代表的なネジ（継手）

W18山24（ウィット18ヤマ24）例.NBSバルブ、S型ノズル、L型ノズル等の接続ネジ

W15山24（ウィット15ヤマ24）例.TEM-U,-V,-D型上フタノズルジョイント接続ネジ

W20山24（ウィット20ヤマ24）例.TEM-U,-V,-D型上フタ攪拌アダプタジョイント接続ネジ

M24P1.5（エム24ピッチ1.5） 例.VPモーター接続ネジ

ウィットネジは山の角度が55°、メートルネジは60°の違いがあります。

ウィットネジの「山24」は、ネジピッチを表し、メートルネジのピッチ1mmほどに相当します。

なおウィットネジは1952年にJIS規格に制定されましたが1968年に除外されています。

上記サイズのネジは弊社で使用している接続継手用ネジです。

お客様の配管に合わせられるよう弊社では「JIS配管ネジ用ジョイント P.111」や「連結用アダプタジョイント P.113」をご用意しております。

P T（R，R c）ネジ、P F（G）ネジはJ I S規格に基づき製作しております。

食い込み継手の取り扱いもございます。（インチサイズが主ですが、ミリサイズの取り扱いもございます。）

*ご希望に応じて、他の形状の接続継手も製作可能です。お気軽にお問い合わせください。